



Termosigillatrici Mocom. Un trio dal successo assicurato.


Dati tecnici	Millseal Rolling
Tensione di alimentazione	220/240 Vac
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza nominale	600 W
Dimensioni esterne	512 x 236 x 145 mm (LxPxA)
Peso	10 kg
Tipo di saldatura	A ciclo continuo e temperatura costante
Temperatura nominale di esercizio della resistenza di riscaldamento	140-190 °C
Larghezza della banda di saldatura	15 mm
Velocità di sigillatura	10 m/min
Materiale sigillabile	Laminati in carta/polipropilene

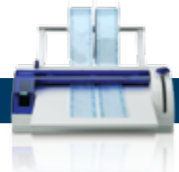

Dati tecnici	Millseal Evo	Millseal Plus Manuale
Tensione di alimentazione	220/240 Vac	220/240 Vac
Frequenza di rete	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza nominale	150 W - 0.45 A	150 W - 0.45 A
Dimensioni esterne (senza rotolo)	474 x 374 x 200 mm (LxHxP)	474 x 374 x 200 mm (LxHxP)
Peso	6,5 kg	5 kg
Tipo di saldatura	A ciclo continuo e temperatura costante	A ciclo continuo e temperatura costante
Temperatura nominale di esercizio della resistenza di riscaldamento	180 °C	180 °C
Altezza della banda di saldatura	12 mm	12 mm
Larghezza massima di saldatura	300 mm	300 mm
Materiale sigillabile	Laminati in carta/polipropilene	Laminati in carta/polipropilene
Diametro massimo del rotolo	200 mm	200 mm

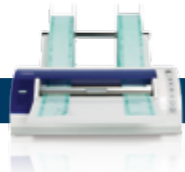

Mocom S.r.l. si riserva di effettuare modifiche sui prodotti illustrati in foto senza alcuna notifica. MMAL5111 31/500

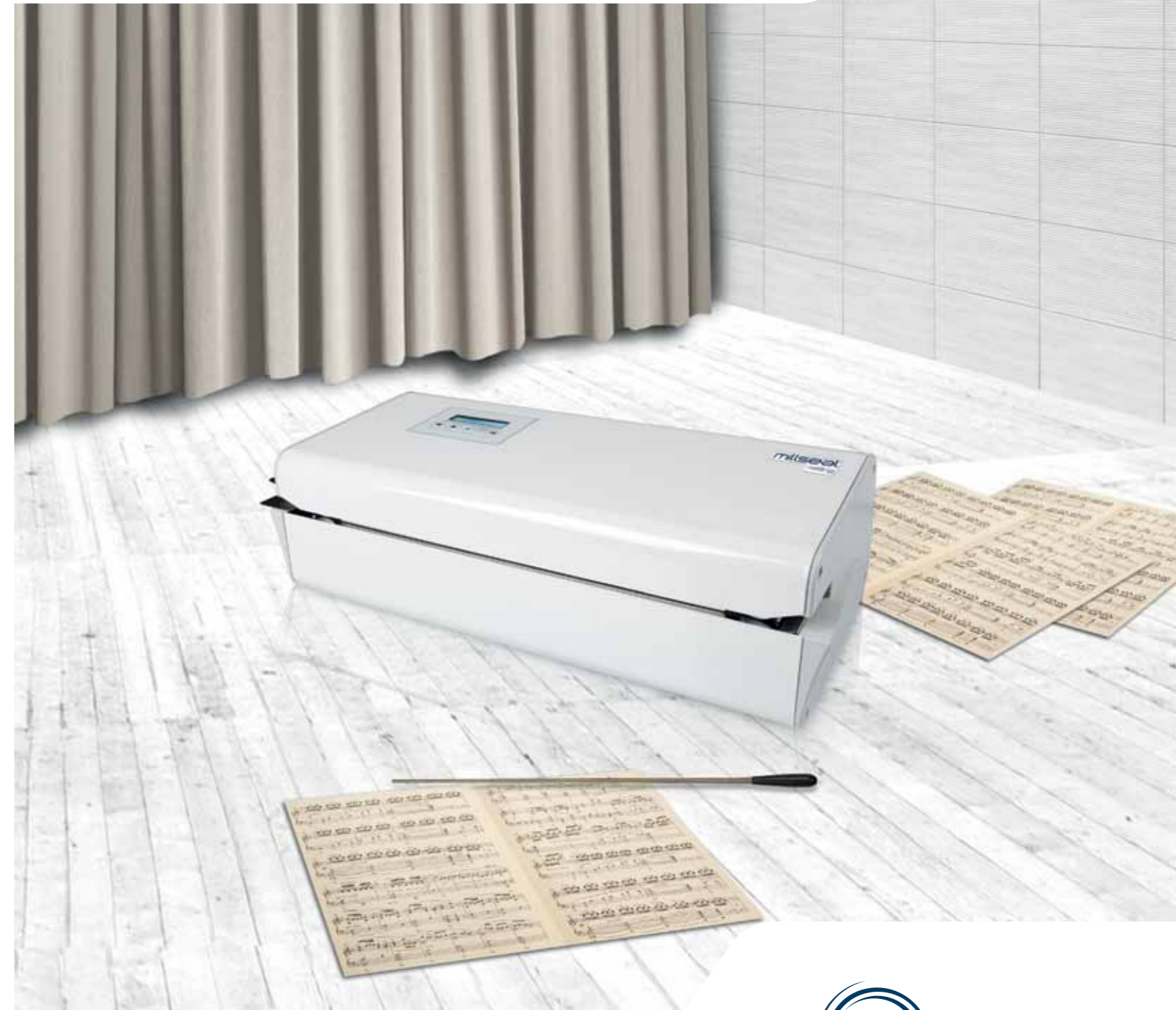

Le protagoniste di un grande successo.

Da oltre venticinque anni Mocom è sinonimo di sterilizzazione: i nostri prodotti sono assolutamente sicuri e all'avanguardia. Ecco perché l'igiene è il nostro credo, il requisito imprescindibile di tutte le nostre proposte, progettate nel rispetto della salute della persona e per agevolare il lavoro degli operatori sanitari. Insieme a sterilizzatrici affidabili e performanti, Mocom propone una serie completa di termosigillatrici efficienti e comode da usare. Soluzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza quotidiana, in versione manuale o automatica ma sempre al servizio del professionista e del suo staff. Le termosigillatrici Mocom garantiscono la salvaguardia della sterilità degli strumenti, ed esaltano la tua professionalità.



Millseal Rolling. Impeccabile in ogni sua esibizione.

La termosigillatrice dalla forma ergonomica e lineare, introduce un nuovo approccio alla sigillatura all'interno dello studio odontoiatrico. La tecnologia di cui è dotata offre infatti una procedura automatica, rapida ed efficace, degna di una standing ovation.



Millseal Rolling è una termosigillatrice a rulli, con sistema di trascinamento automatico con fotocellula. Con una qualità di tipo medicale, Millseal Rolling velocizza e ottimizza la sigillatura di buste pretagliate e saldate su 3 lati. La multi banda di saldatura da 15 mm garantisce nel tempo la sterilità degli strumenti imbustati. Grazie alla regolazione della temperatura e della pressione di saldatura, è possibile ottenere un efficace controllo dell'azione di saldatura, assicurando prestazioni elevate e costanti. L'ampio display permette di impostare e visualizzare i parametri operativi in modo semplice e intuitivo.



Millseal Rolling può essere dotato di una stampante integrata che durante il ciclo di sigillatura imprime automaticamente sulla busta la data di confezionamento e la data di scadenza, nonché i simboli richiesti dalle normative vigenti. In questo modo, è possibile tenere sempre sotto controllo il mantenimento della sterilità del materiale imbustato.




Accessori

Per facilitare la fase di saldatura delle buste, è disponibile un piano di scorrimento realizzato in acciaio inox, facilmente igienizzabile.



In caso di buste con carichi più pesanti o ingombranti, l'utilizzo della pratica rulliera facilita lo scorrimento, rendendo più agevole la loro movimentazione.

Per la realizzazione delle buste di sterilizzazione, Millseal Rolling può essere completata con una pratica taglierina. Installata in posizione orizzontale sul piano o verticale a parete, questo strumento permette di tagliare i rotoli di carta nella lunghezza desiderata.

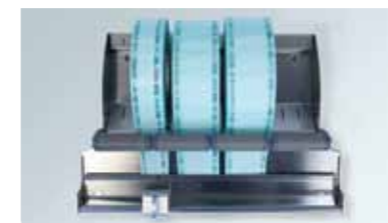

Una produzione rispettosa delle normative vigenti:



- Applicazione della Direttiva CE 2006/42.
- Applicazione delle Direttive CE 2006/95, 2004/108.
- Standard di riferimento EN 61010-1:2001, EN 61326-1:2006.



Millseal Evo. Un crescendo di semplicità ed efficienza.

La straordinaria armonia della termosigillatrice Millseal Evo nasce dal design minimalista e dalle dimensioni particolarmente compatte.

Si distingue per la semplicità d'uso e per la gestione completamente automatica della fase di preparazione; dopo aver impostato la lunghezza e il numero delle buste che si desidera preparare, basta premere il tasto "Programma" per avviare la procedura.

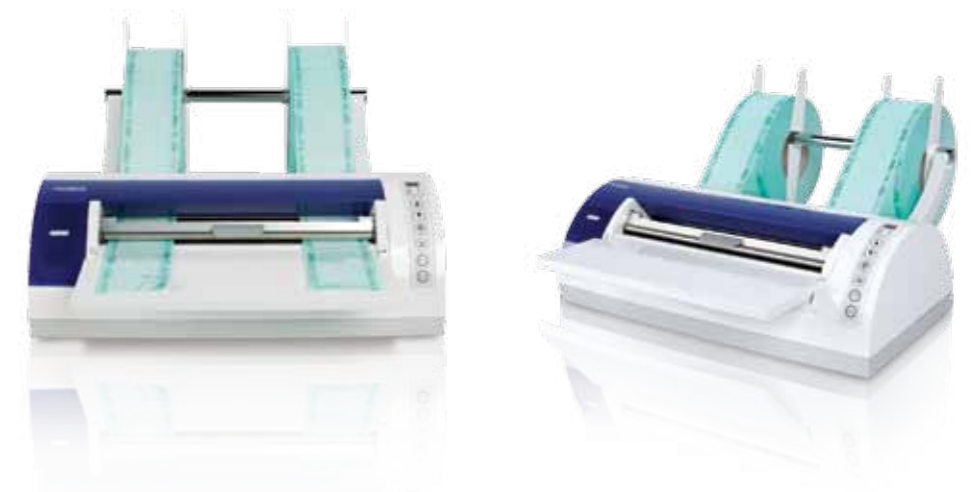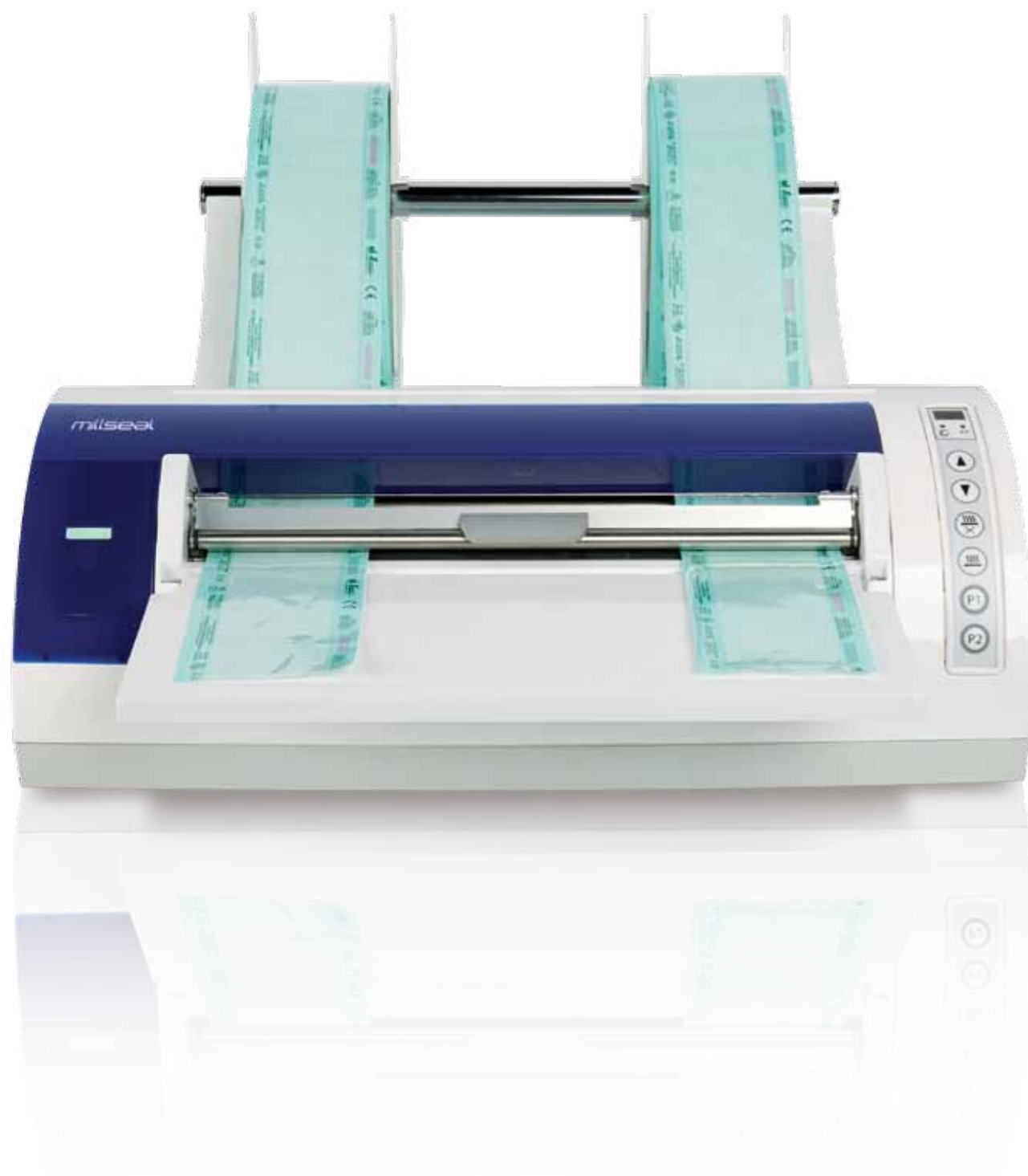

La tastiera permette di impostare la lunghezza e la quantità delle buste, memorizzando fino a due programmi. Il display consente di visualizzare la lunghezza e il numero delle buste.



Oltre allo scorrimento motorizzato, i tasti "Cursore" permettono di impostare i parametri di lunghezza e numero delle buste.



I tasti "Sigillatura" e "Taglio" permettono di confermare i parametri impostati, nonché preparare le buste in modo tradizionale.



Con un solo gesto è possibile eseguire la sigillatura finale delle buste.



Premendo il tasto "Programma", la termosigillatrice prepara automaticamente le buste nella quantità e nella lunghezza stabilite. È possibile pre-programmare due set di parametri.



Millseal Plus manuale. Un capolavoro intramontabile.

Millseal Plus è la termosigillatrice ad alte prestazioni, dal design innovativo e con una tecnologia all'avanguardia. Un classico di cui è impossibile fare a meno.



Millseal Plus e Millseal Evo: due note, un'armonia.



Garanzia di mantenimento della sterilizzazione

Le termosigillatrici Millseal sono dotate di un controllo elettronico dei parametri di sigillatura (tempo e temperatura) e garantiscono una banda di sigillatura di 12 mm, ben superiore agli standard richiesti dalle normative vigenti.

I segnali acustici e luminosi, inoltre, informano sulle corrette condizioni di operatività della termosigillatrice.



Prestazioni elevate e costanti

Grazie alla regolazione automatica della temperatura, si ottiene un efficace controllo del riscaldamento nella zona di saldatura, assicurando l'elevata qualità delle prestazioni nel tempo.

Inoltre, le termosigillatrici Millseal offrono un sistema di protezione da surriscaldamento e di stand-by automatico per un risparmio energetico.

Design ergonomico e funzionale

Le termosigillatrici Millseal uniscono la semplicità d'uso a un'elevata affidabilità. Il sistema di mantenimento in posizione della carta evita il riavvolgimento del rullo dopo la sigillatura e taglio, permettendo così una procedura lineare e senza interruzioni.