


ASPIRATORE DI FUMI CHIRURGICI “ASPI”

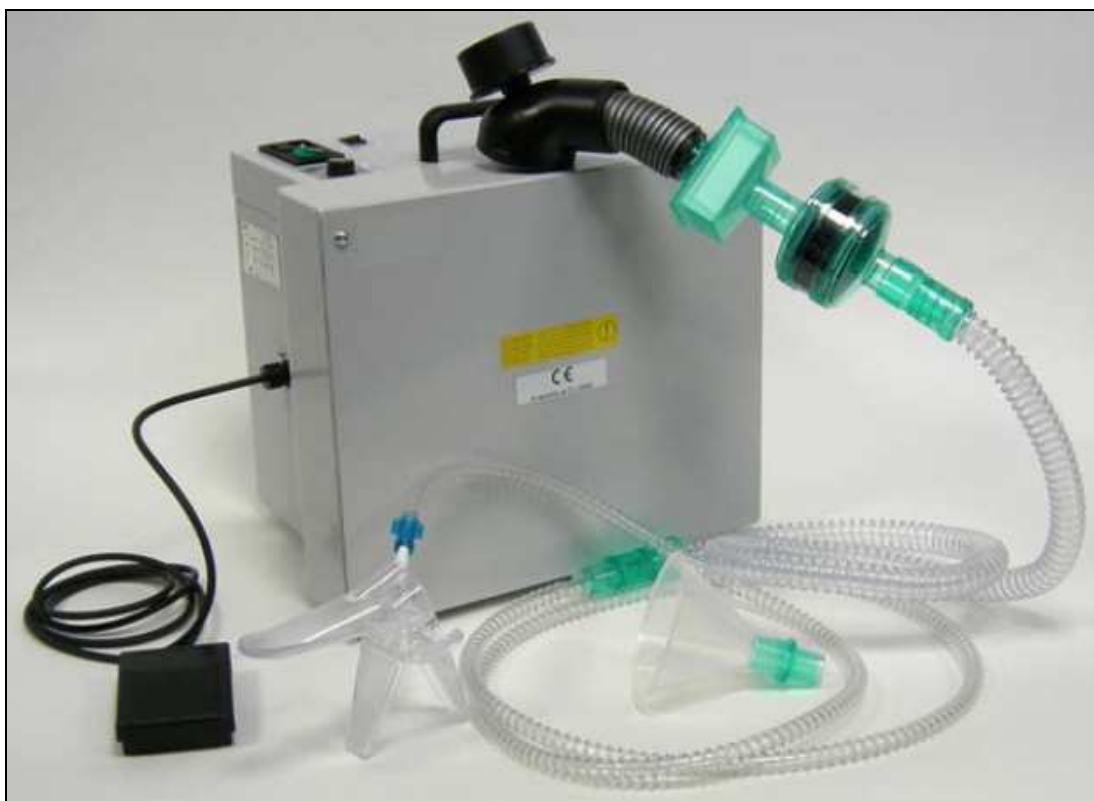

L'aspiratore dei fumi ASPI permette l'evacuazione dei fumi chirurgici e la loro filtrazione in modo da rendere il campo operatorio visibile e proteggere il paziente ed il personale dall'esposizione agli aerosol portati dal fumo.

La parte terminale, del set di filtrazione fumi, è disponibile con terminale a tubo corrugato da 10 o da 20 mm per l'eventuale collegamento di uno speculum o di una bocchetta conica.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenziometro regolabile elettronicamente	
Comando accensione e spegnimento a pedale	
Elevata silenziosità a tutti i regimi	68 db (A) max (1 m)
Portata d'aria	39 lt/s (max)
Depressione	1.900 mm/H ₂ O
Doppio filtro di protezione	- membrana antimicrobica idrofobica a filtrazione meccanica con efficienza di ritenzione batterica e virale del 99,99999% - carbone attivo per rimozione odori
Doppio fusibile di protezione	5 AT 250 Vac
Alimentazione	220 V – 50 Hz
Potenza	Max 1.200 VA
Dimensioni	400 x 380 x 290 mm
Peso	15 Kg
Norme di riferimento “CE” medicale	MDD 93/42 CE modificata dalla 2007/47CE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 46 del 24/02/97 e succ. modificazioni
Norme di riferimento “CE” elettrico	Direttiva 2006/95/CE (Direttiva bassa tensione) Direttiva 2004/108/CE (Direttiva EMC) CEI EN 60601-1 (1998) CEI EN 60601-1-2(2003) + A1 (2006)

GIEFFE

CE

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com