



N° 443.090.V

Lemi 4

Lemi[®]
MADE IN ITALY



product description

Lemi 4 is a multifunction couch, especially suitable for diagnostics, dermatology, check-up, laser, small surgery, dental clinics, chemist's.

Thanks to the fully electrical adjustment of all movements, Lemi 4 is the ideal partner allowing professionals the pleasure of working with absolute ease and assuring the maximum comfort to patients, as well as an easy access in and out of the chair.

Extremely practical and versatile, Lemi 4 is equipped with 4 electric actuators adjusting height, backrest, legrest and trendelenburg with high precision.

Moreover, the automatic feature (AUT) permits returning the chair to its original position.

110 and 220 V. versions are both available. Lemi 4 galvanized steel frame is fully wrapped in ABS covering, thus providing elegance as well as safety.

The standard version is supplied with foot pedal or remote control and a flat mattress without sewing to ensure easy cleaning and the highest hygiene.



descrizione prodotto

Lemi 4 è una poltrona-lettino multifunzione ideale per visite diagnostiche, dermatologia, check-up, trattamenti con laser, piccola chirurgia, odontoiatria, cliniche dentali, farmacie.

Grazie alla regolazione completamente elettrica di tutti i movimenti, Lemi 4 è l'alleato ideale per ogni professionista che desideri lavorare in condizioni ottimali ed accogliere il proprio paziente con stile.

Molto versatile e semplice da utilizzare Lemi 4 è fornito di 4 attuatori elettrici che consentono di scegliere autonomamente la posizione e l'altezza migliori per operare, permettendo al paziente di accomodarsi e rialzarsi senza sforzo. È provvisto inoltre di un utile comando di azzeramento automatico (AUT) che consente di riportare il lettino nella posizione base.


Disponibile a 110 o 220 V., è dotato di una struttura in acciaio zincato completamente chiusa con carter in abs, che conferisce al lettino eleganza e sicurezza.

La versione standard include un pratico comando a pedale o pulsantiera ed un materasso piatto senza cuciture per garantire una facile pulizia e la massima igiene.

colors • colori

The plastic covering is available in the following color.

Il carter è disponibile nei seguenti colori.

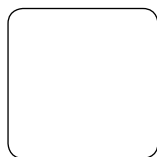

105 B
white
bianco



105 N
black
nero




105 G
light grey
grigio

The Mattress can be manufactured **in over 50 colors** available in following collections: Tundra, Stamskin, Flexo.

Il Materasso può essere scelto **in oltre 50 colori** disponibili a magazzino nelle seguenti collezioni: Tundra, Stamskin, Flexo.

table of dimensions • tabella dimensionale

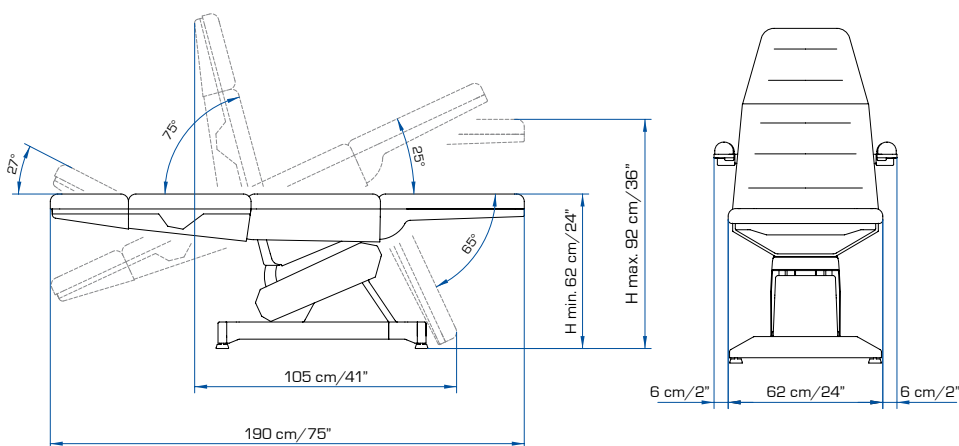

Lemi 4 is CE conformed and is manufactured in accordance with European Directives: 2006/42/CE; 2004/108/CE; 93/42/CE (class I); CEI EN 60204-1:2006-09; UNI EN 12100-1-2

Lemi 4 è a norme CE ed è fabbricato in conformità alle seguenti Direttive Europee: 2006/42/CE; 2004/108/CE; 93/42/CE (classe I); CEI EN 60204-1:2006-09; UNI EN 12100-1-2



accessories upon request • accessori su richiesta



roll holder
porta rotolo
cod. 108



big Zak head rest
testa Zak grande
cod. 111



small Zak head rest
testa Zak piccola
cod. 111P



anatomic mattress
w/out sewing
materasso anatomico
senza cuciture
cod. 109



flat arm rest couple
coppia braccioli
automatici
cod. 107



american face hole
testa americana
cod. 112 a



plastic cover
proteggi gambe
cod. Prot. gambe



metal tray with support
vassoio con supporto
cod. 331



medical armrest
couple
coppia braccioli
medicali
cod. 313



blood-sample taking
armrest couple
coppia braccioli da
prelievo con snodo
cod. 314



jointed thigh support
couple
coppia reggicoste
con snodo
cod. 318



fixed and rotating
clamps
morsetti fissi e girevoli
cod. 319-320



heel support couple
coppia di reggi tallone
cod. LEM - 151



wheels
ruote
cod. LEM - 139



foot pedal control
pedale
cod. LEM-067



seat and back medical
guides
guide medicali seduta
e schiena
cod. 316-317

packaging details • caratteristiche imballo

packaging size/dimensioni imballo:

170 x 74 x 86 h cm (67"x30"x34")

volume/volume: 1,081 m³

gross weight/peso lordo: 89 kg (196 lbs.)

net weight/peso netto: 73 kg (161 lbs.)

max lift capacity/portata max: 200 kg (440 lbs.)

electric requirements • caratteristiche elettriche

voltage/voltaggio: V 230 AC

frequency/frequenza: 50 Hz

absorption/assorbimento: 0,70 Amp max



credits:

photo by luca bravo



USA Branch:

Lemi USA LLC

280 Fentress Blvd

Daytona Beach, FL. 32114

T. 386-239-8433

F. 386-239-8627

www.lemiusa.com • info@lemiusa.com

Brusaferrri & C S.r.l.

Sede operativa:

S.P. n. 6 • 26011

Casalbuttano (CR) • Italy

Tel. +39 0374 363068/69

Fax +39 0374 363071

www.lemi.it • info@lemi.it



The manufacturer firm reserves the right to effect changes to the images and description of this catalogue at any time for commercial or technical purpose.

Il costruttore si riserva il diritto di effettuare le modifiche alle immagini e alle descrizioni di questo catalogo in ogni momento per esigenze di carattere tecnico e commerciale.