


**NUOVO! HEINE® iC 1**

**Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo**

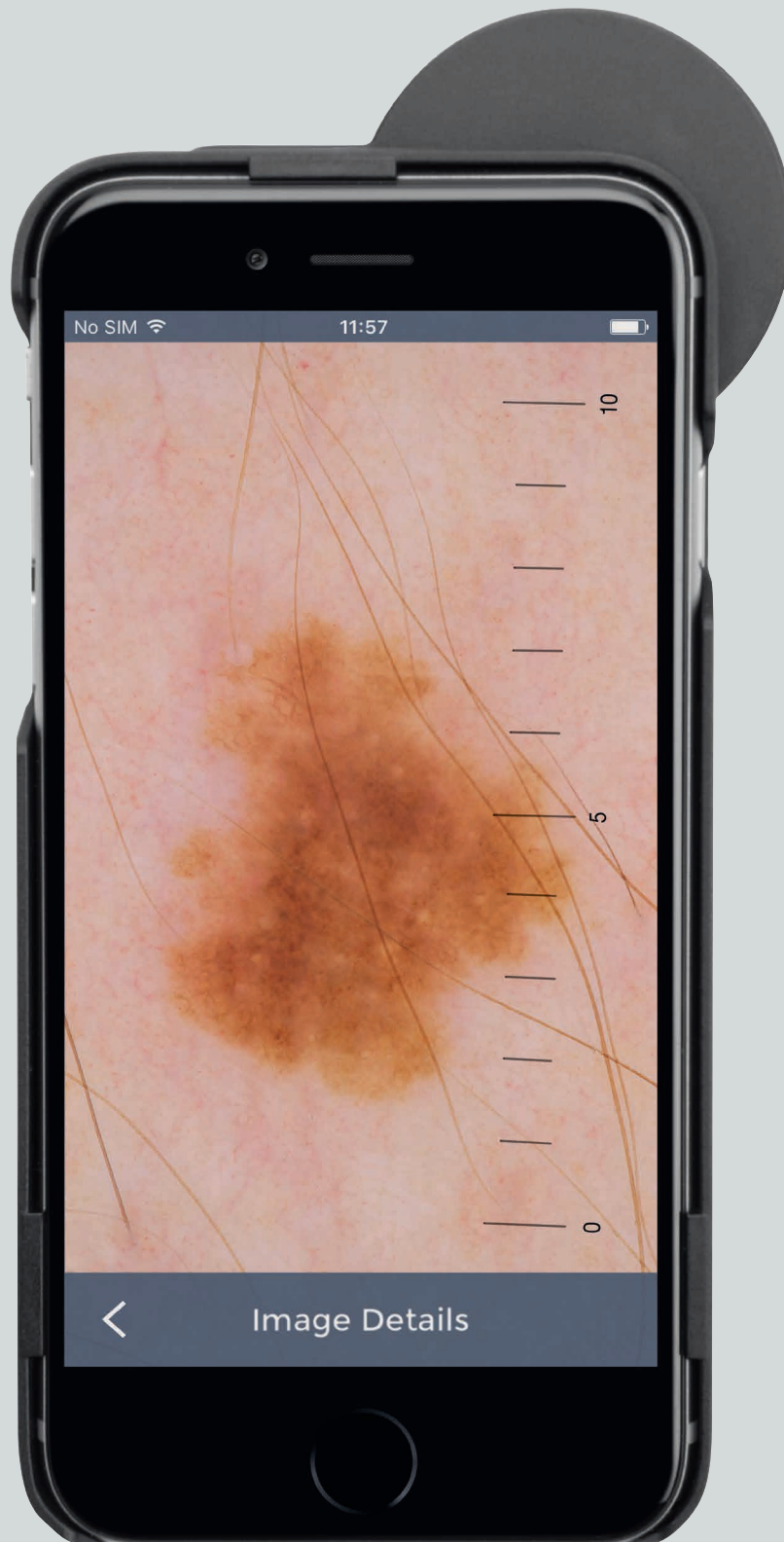

# NUOVO! HEINE® iC1 – Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo

HEINE iC 1 è un nuovo dispositivo di acquisizione di immagini cliniche e dermatoscopiche per la documentazione, il monitoraggio e il supporto di diagnosi differenziali del melanoma e di altre lesioni cutanee. L'innovativa illuminazione HEINE LED<sup>HQ</sup> in combinazione con ottiche di precisione garantiscono alta risoluzione e immagini esenti da riflessi con un Apple® iPhone® 5, 5s, 6 o 6s. La funzione «Toggle» integrata consente di alternare facilmente tra visione polarizzata e non polarizzata.



## [ ACCESSORI ]

<b>Cavo USB con trasformatore a rete per uso medico E4-USB [01] + [02]</b> trasformatore a rete per uso medico da 5V e 500mA; con adattatori per prese intercambiabili	N.Art.: X-000.99.303
<b>Piastrina di contatto</b> con scala millimetrata [03]	N.Art.: K-000.34.201
<b>Case per telefonino</b> Apple iPhone 6/6s [04]	N.Art.: K-000.34.250
<b>Case per telefonino</b> Apple iPhone 5/5s	N.Art.: K-000.34.251



## [ SCHEDA TECNICA ]

Codice catalogo: <b>K-270.28.305</b> <b>iC 1 set/6</b>	completo di: HEINE iC 1 con piastrina di contatto con scala, case per telefono mobile iC 1/6 per Apple iPhone 6/6s [05], cavo USB con trasformatore a rete per uso medico
Codice catalogo: <b>K-271.28.305</b> <b>iC 1 set/5</b>	completo di: HEINE iC 1 con piastrina di contatto con scala, case per telefono mobile iC 1/5 per Apple iPhone 5/5s, cavo USB con trasformatore a rete per uso medico
GTIN	4053755186044
Versioni disponibili	iC 1/5 per iPhone 5/5s, e iC 1/6 per iPhone 6/6s
Peso	140g
Dimensioni	140x65x42mm fino a 155x75x50mm
Manuale d'uso	DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT
Condizioni di funzionamento	+10 °C a +35 °C, 30 % a 75 % RH, 700hPa a 1060hPa
Condizioni di trasporto	-20 °C a +50 °C, 45 % a 85 % RH, 500hPa a 1060hPa
Dati elettrici	micro USB (5V) <500mA, tempo di ricarica circa 2,5h, operatività continua circa 3,5h batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Dati ottici	ingrandimento ottico = 15x, ingrandimento digitale = 40x (con iPhone 6 e Display 24"), campo visivo 21mm
LED	4x LED ad alta potenza, temperatura colore: di norma 5000K, durata: di norma 100000h, CRI di norma ≥80

\*l'Apple iPhone 5/5s/6 o 6s non è compreso nella dotazione di fornitura.  
Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.  
App Store è un marchio registrato di Apple Inc.

